


# BIO MAGNETIC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

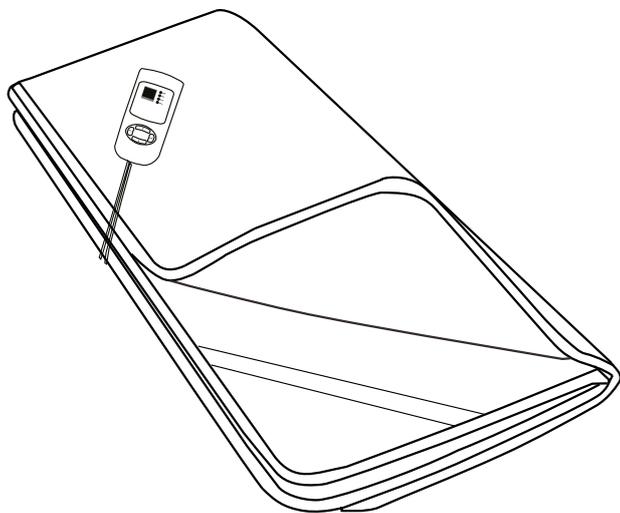

ПРОГРЕВ

## УПРАВЛЕНИЕ

### [1] Включение / Выключение

При нажатии кнопки ON/OFF (Питание), Bio Magnetic приходит в режим готовности и начинает обратный отсчет 30 минутного периода. При повторном нажатии кнопки или по истечении 30 минут Bio Magnetic прекращает работу.

### [2] ▲▼

Регулировка стрелками выбранного вами параметра.

### [3] Температура

Кнопка активации температурного режима. Выбор температуры производится стрелками на пульте управления.

### [4] Вход

Кнопка активации временного режима. Регулировка производится стрелками на пульте управления.

### [5] Дисплей


На дисплее отображаются все текущие настройки.

### [6] Лампочка времени

Загорается при активации режима времени.

### [7] Лампочка питания

Загорается, когда устройство включено.

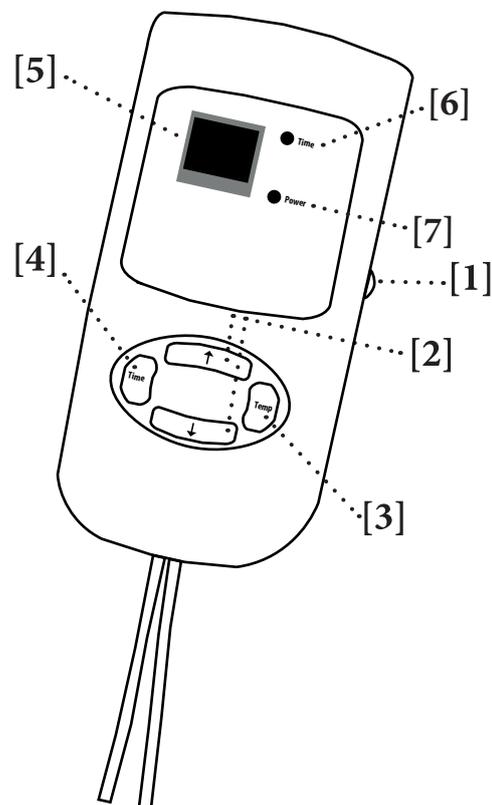

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Bio Magnetic
- Сетевой адаптер
- Пульт управления

## НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации проверьте, соответствует ли сетевое напряжение напряжению, указанному на штепсельной вилке. Если да, то вставьте штепсельную вилку в розетку.

Расположите Bio Magnetic на ровной устойчивой поверхности. Следите за тем, чтобы все Ваше тело располагалось по центру, так чтобы тепло распределялось равномерно.

## ПРОГРЕВ

Bio Magnetic при нагревании создает низкочастотное магнитное поле и излучает анионы, что очень благотворно действует на человеческий организм. Тепло проникает глубоко в ткани и активизирует самовосстанавливающие силы организма.

Для Вашей собственной безопасности механизм оборудован защитой от перегрева. Тепло генерируется в условиях большой нагрузки и избыточного давления. До того, как это приведет к возникновению любого риска, произойдет автоматическое отключение системы, повторное включение будет возможным только спустя 30 или 50 минут простоя.

# BIO MAGNETIC

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

### ХРАНЕНИЕ / УХОД

Регулярный уход продлит срок службы Вашего массажера Bio Magnetic и будет гарантией безопасной эксплуатации на всем протяжении использования.

1. Рекомендованные условия хранения: сухое место, без пыли.
2. Избегайте попадания жидкостей на Bio Magnetic и воздействия открытого огня.
3. Очищайте его, используя сухую мягкую ткань.
4. Когда матрасник не используется, всегда отключайте его от источника питания.

### ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
Матрасник не работает, хотя он подключен к источнику питания.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте соединение адаптера.</li><li>• Возможен перегрев после длительного использования. Он автоматически охлаждается до своего нормального состояния. Отключите питание и позвольте ему охладиться.</li></ul>


### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 90 x 190 см  
Номинальная мощность: 50 Ватт  
Напряжение:  
Вход: переменный ток 220 В ~ 50 Гц  
Время работы в автоматическом режиме: 30 минут

Сертификаты:

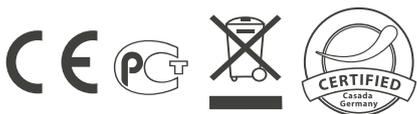

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения надлежащего функционирования и оптимального эффекта просим Вас внимательно прочитать следующие инструкции перед применением данного оздоровительного оборудования. Просим Вас сохранить данную инструкцию для последующего использования!

• Данный матрасник соответствует общепризнанным принципам технологии и действующим нормативам техники безопасности.

• Данное оборудование не требует технического обслуживания. Любой необходимый ремонт может быть выполнен авторизованным специалистом. Неправильное использование и несанкционированный ремонт запрещены по причинам безопасности и ведут к аннулированию гарантийных обязательств.

• Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

• Избегайте контакта оборудования с водой, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

• В случае неиспользования в течение длительного периода убедитесь в его отключении от сети питания для предотвращения риска короткого замыкания.

• Не используйте поврежденные штепсельные вилки, шнуры питания или плохо закрепленные розетки. Поврежденные вилки или шнуры питания должны быть заменены производителем, представителем сервисной организации или квалифицированным персоналом. При неисправности немедленно отключите оборудование от сети питания. Мы не несем ответственности за повреждения по причине неправильного или ненадлежащего использования.

• Во избежание чрезмерной нагрузки на мышцы и нервные волокна не следует превышать рекомендованную продолжительность сеанса в 30 минут.

• Не используйте заостренных или острых предметов.

• Любого массажа – в том числе и ручного – следует избегать во время беременности и/или при наличии одного или более противопоказаний в области массажа: головная боль, недавние травмы, тромботические заболевания, воспаления и опухоли любого типа, включая раковые. Рекомендуется посоветоваться со своим врачом перед лечением любых повреждений или заболеваний.

• Не используйте во время управления автомобилем.

• Если Вы используете электрические аппараты, например, кардиостимулятор, то перед любым видом применения массажера Вам следует проконсультироваться со своим врачом.

#### Производитель:

Casada GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderbon, Germany  
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0  
www.casada.de  
info@casada.de

#### Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»  
109518, Москва,  
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1  
тел: (495) 229-45-32  
факс: (495) 229-45-33  
Эл. адрес: info@casada.ru  
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH» они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2013 г.  
Casada International GmbH  
Все права защищены.

