



## Устранение Проблем в Работе

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	1. Нет питания 2. Кнопка питания не включена 3. Сработала защита от перегрева	1. Вставьте вилку в розетку питания 2. Нажмите на кнопку включения 3. Выключите массажер и включите снова после его охлаждения
Волновая функция работает плохо	Сетчатый фильтр засорился	Почистите сетчатый фильтр
Волновая функция не работает в холодную погоду	Водяной насос замерз	Наполните массажер горячей водой чтобы разморозить насос



## Спецификация

Тип	Спа Массажер для Ног
Модель	HS 815
Питание	220 В, 50 Гц
Мощность	810 Вт
МАКС тем-ра	50°C
Емкость	20 л
Безопасность	

**HANSUN 韩尚®**  
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ



**HS 815**  
**СПА Массажер Для Ног**

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку нашего спа-массажера для ног. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед его использованием. В инструкции содержатся правила по использованию, очистке, обслуживанию, а также требования по технике безопасности. Пожалуйста, сохраняйте данное руководство на случай возникновения вопросов.

## Важные Меры Безопасности

- Если у Вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед использованием массажера.
- Рекомендуемое время использования массажера за один сеанс 30 минут.
- Избегайте включения и выключения массажера от сети, когда ноги находятся в воде.
- Перед включением или выключением массажера от сети, убедитесь, что кнопка ВКЛ/ВЫКЛ находится в выключенном положении.
- Никогда полностью не погружайте массажер в воду для его очистки.
- Не вставляйте в спа-массажер и избегайте чрезмерных нагрузок на него при использовании. Использовать спа-массажер можно только в сидячем положении.
- Не оставляйте массажер включенным, если вы его не используете.
- Не включайте массажер, если поврежден его сетевой шнур. Если у вас возникли сомнения в исправности массажера, обратитесь в ближайший сервисный центр HANSUN или к авторизованному дилеру, для проверки и устранения проблемы.
- Внимательно контролируйте процесс использования спа-массажера детьми или недееспособными людьми.
- Никогда не используйте массажер во время сна или, если Вы почувствовали, что засыпаете.
- Немедленно прекратите использование массажера, если Вы ощутили дискомфорт, появилось какое либо раздражение или боль. Никогда не используйте массажер при опухлях и воспалениях на ногах без консультации с лечащим врачом.
- Данный спа-массажер имеет нагреваемую поверхность. Особое внимание на это следует обратить людям слабо чувствительным к высоким температурам, поскольку существует опасность появления ожогов.

## Противопоказания к Применению

Люди, имеющие проблемы со здоровьем, должны проконсультироваться с лечащим врачом перед применением спа-массажера.

1. Запрещено использовать массажер людям с имплантированными медицинскими электронными устройствами, чувствительными к электромагнитным помехам, включая кардиостимуляторы.
2. Противопоказано для людей со злокачественными опухолями.
3. Противопоказано для людей с нарушением сердечной деятельности.
4. Противопоказано для беременных или только что родивших женщин.
5. Противопоказано для людей с ограниченными сенсорными возможностями, включая невропатию и диабет.
6. Противопоказано для людей с остеопорозом, травмами позвоночника, включая переломы и растяжения связок.
7. Противопоказано для людей с открытыми ранами на ногах.
8. Противопоказано для людей с плохим самочувствием или нуждающимся в отдыхе.
9. Противопоказано для людей с нарушением кровообращения в ногах

## Порядок Эксплуатации

- Не используйте массажер в помещениях с высокой влажностью. Если массажер намок, пожалуйста, не используйте его и обратитесь в ближайший сервисный центр, где эта проблема будет устранена.
- Температурный режим для использования спа-массажера от 0°C до 40 °C.
- Пожалуйста, держите массажер подальше от нагревательных и электрических приборов. Храните его в помещении без доступа прямых солнечных лучей.
- Данный спа-массажер предназначен только для домашнего использования.

## Порядок Чистки и Хранения

### А. Чистка

1. Перед чисткой отключите массажер от сети.
2. Для чистки используйте чистую, сухую ткань.
3. Никогда не используйте растворитель, бензин или спирт для чистки.

### В. Хранение

1. Храните массажер в его коробке, в прохладном, проветриваемом и сухом помещении.
2. Не пытайтесь самостоятельно разбирать массажер и не допускайте его падения с высоты.
3. Храните массажер в недоступном для детей месте.
4. Не храните массажер в помещении с высокой температурой или под воздействием прямых солнечных лучей.
5. Если массажер долго не включали, сначала убедитесь, что он функционирует правильно.

## Функции и Особенности



Полное  
Покрытие



Водяная  
Циркуляция



Индикатор  
Температуры



Авто Роликовый  
Массаж





Подогрев  
Циркулирующей  
Воды



Сливная  
Труба



## Дисплей Управления, Составные Части

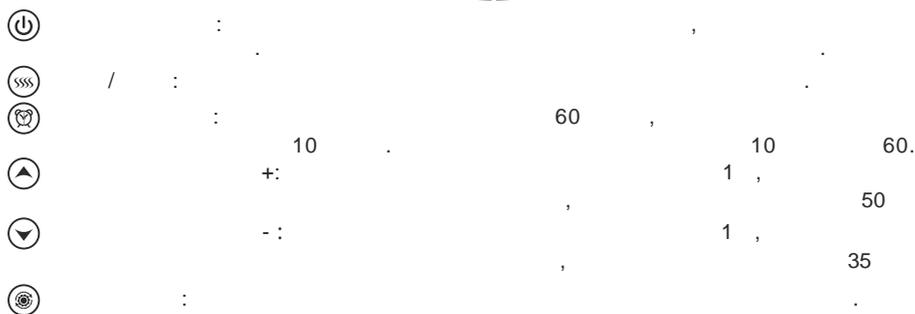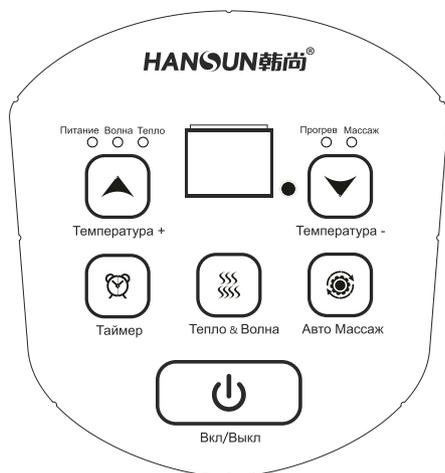

Панель управления

Волновой выпуск

Массажные ролики

Водяной  
рассеиватель

Сливная трубка

Колесики с Блокировкой

Акупунктурные  
Массажные Валики

Фонтанообразный  
выпуск

Индикатор тем-ры

Сетчатый фильтр



## Порядок Эксплуатации

1. Перед использованием массажера, убедитесь что он полностью исправен. Только после этого Вы можете приступить к его использованию.
2. Поставьте массажер на пол или другую горизонтальную поверхность.
3. Наполните массажер водой до верхнего уровня. В зимнее время, для сокращения времени нагрева воды, можете наполнять массажер сразу горячей водой 38°C.
4. Подключите вилку к сетевой розетке питания.
5. Нажмите кнопку и массажер перейдет в рабочий режим по умолчанию, индикатор температуры начнет мигать синим и красным, а потом загорится синим. Температура по умолчанию установлена на значение 44°C.
6. В режиме по умолчанию нажмите кнопку и функция Тепло&Волна выключится. Нажмите кнопку еще раз для включения этого режима.
7. При включении функции обогрева можно установить температуру от 35 до 50°C, нажимая кнопки и . Одно нажатие будет изменять температуру на 1°C. Нажмите и держите кнопку или для быстрого изменения температуры. Установленная температура будет отображаться на экране дисплея. Массажер будет изменять температуру, а индикатор загорится синим. При достижении температуры требуемого значения, индикатор загорится красным, массажер выключит прогрев и перейдет в режим поддержания температуры.
8. По умолчанию время массажа 60 минут, нажмите кнопку чтобы установить время 10 минут. Каждое нажатие добавляет еще 10 минут до максимального значения 60 минут.
9. В режиме по умолчанию нажмите кнопку и функция Массаж выключится. Нажмите кнопку еще раз для включения этого режима.
10. После окончания установленного времени работы массажеры выключаются.
11. После окончания использования массажера, отключите его от питания и переместите его в удобное место для слива воды. Опустите сливную трубку вниз и откройте крышку, после чего вода начнет сливаться.