

ТАКАСИМА



Массажер для головы
iDream 1180



Руководство пользователя



www.stimul.gitt.ru


Содержание

Вступление.....	2
Комплектация.....	3
Описание функций.....	4
Подготовка к использованию. Меры предосторожности	8
Настройки.....	9
Устранение неполадок. Спецификация.....	10
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.....	11


Вступление

Массажер для головы iDream1180 применяет систему интеллектуального давления воздуха и технологию управления микрокомпьютерным чипом. Под действием давления и вибрационного массажа головы массажер улучшает кровообращение, ослабляет напряжение и снимает усталость в голове, улучшает обмен веществ и общее самочувствие. Также, в массажер встроен музыкальный проигрыватель, помогающий поддерживать расслабленное состояние.


Комплектация

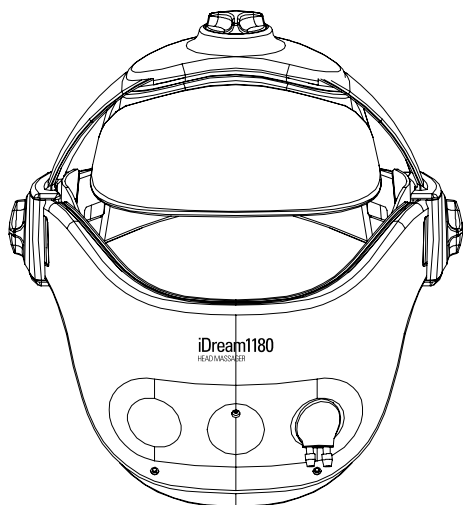


Основная Часть

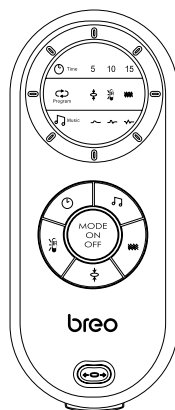

Пульт Управления

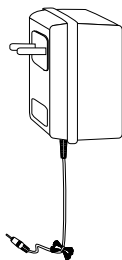


Блок Питания

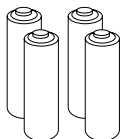

Батарейки




Руководство Пользователя

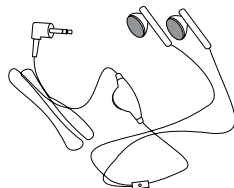

Наушники


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ МАССАЖЕРА

Основная Часть

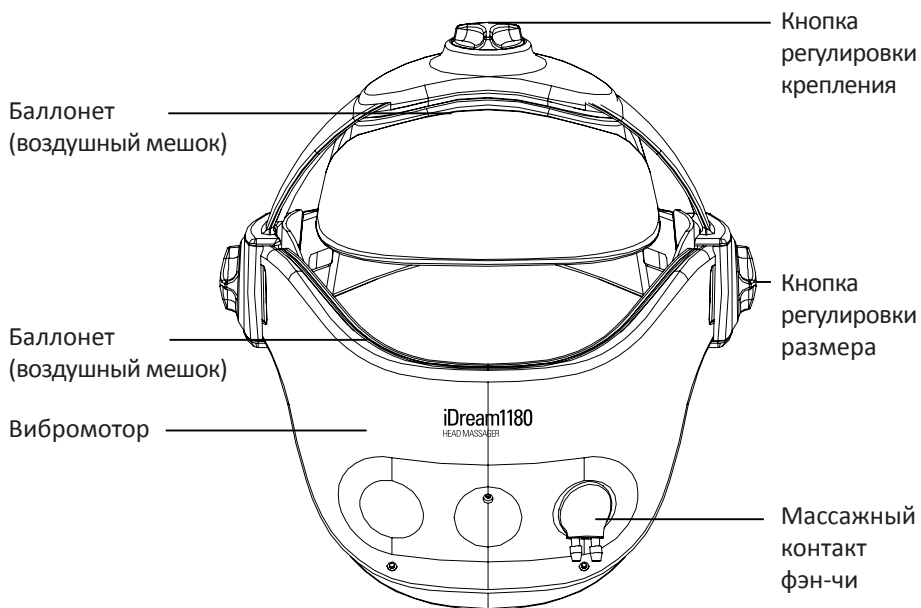

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления

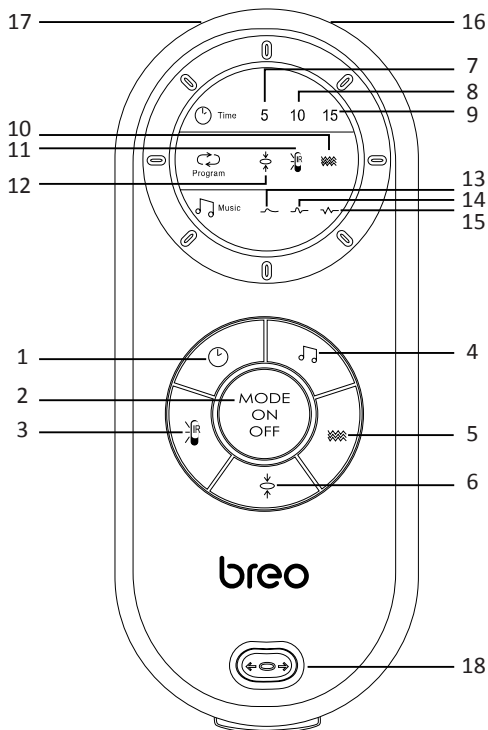

- 1 – Настройка времени
- 2 – Режим/вкл/выкл
- 3 – Настройка светодиода
- 4 – Выбор музыки (нажмите, чтобы выбрать музыку, зажмите, чтобы остановить воспроизведение)
- 5 – Настройка вибрации
- 6 – Настройка воздушного давления (Нажмите, чтобы выбрать режим массажа, зажмите, для усиленного массажа на 10 с)
- 7 – Индикатор «5 минут»
- 8 – Индикатор «10 минут»
- 9 – Индикатор «15 минут»
- 10 – Индикатор вибрации
- 11 – Индикатор светодиода
- 12 – Индикатор воздушного давления
- 13 – Индикатор релаксирующей музыки
- 14 – Индикатор музыки мозговых волн
- 15 – Индикатор природной музыки
- 16 – Интерфейс наушников
- 17 – Интерфейс зарядки (USB)
- 18 – Кнопка управления воздушным давлением

Подготовка к использованию

Установка батареек

1. Слегка нажмите на кнопку крепления и выньте ремень.
2. Откройте батарейный футляр и вставьте четыре батарейки AA.
3. Вставьте батарейный футляр.

Работа с блоком питания:

1. Используйте Блок Питания DC6V, входящий в комплект поставки.
2. Воткните штепсель Блока Питания во входное отверстие контроллера.
3. Подсоедините Блок Питания к источнику питания.

Примечание:

Проверьте, правильно ли соблюдена полярность батареек и крепление футляра. Проверьте маркировку на коробке батареек, чтобы узнать полярность. Рекомендуются щелочные батарейки.

Меры предосторожности

- Соблюдайте меры предосторожности и инструкции при работе с массажером.
- Не рекомендуется использовать массажер лицам, страдающим от болезней мозга или перенесшим операции на мозге.
- Снимите контактные линзы и выньте заколки и украшения из волос перед использованием массажера.
- Не используйте воду при чистке массажера. Для чистки используйте хлопковые тряпочки с техническим спиртом.
- Не держите кабель устройства при использовании массажера. Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно.
- Наденьте устройство перед включением, чтобы избежать повреждений боллонета (воздушного мешка) избыточным давлением.
- Не используйте устройство в помещениях с высокой температурой или влажностью.
- Убедитесь, что устройство не подвержено воздействию сильных солнечных лучей и эрозионному воздействию газов.
- Не выходите на улицу и не садитесь за руль во время использования массажера.
- Используйте батарейки AA или поставляемый в комплекте блок питания. Не вставляйте батарейки при использовании внешнего источника питания. Удалите батарейки, если не собираетесь использовать массажер в течение длительного периода времени чтобы избежать повреждений, вызванных протечкой жидкости из батареек.


Настройки

Обычный режим

Обычный режим – это минуты массажа с воздушным давлением и релаксирующей музыкой. Режим массажа повторяется. Вы можете настроить музыку, время, уровень вибрации и функции воздушного давления.

Настройка музыки

Нажимает кнопку выбора музыки, чтобы изменить музыку. Зажмите, чтобы остановить воспроизведение.

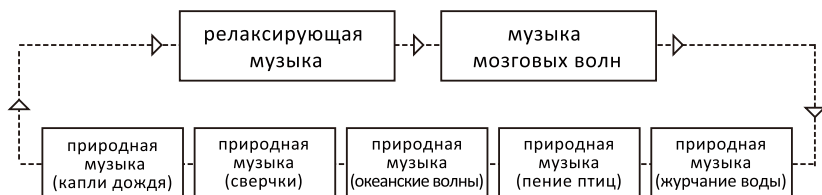


Настройка воздушного давления

Последовательность режимов воздушного давления



Настройка времени

Нажмите кнопку настройки режима времени чтобы выбрать режим времени в следующей последовательности

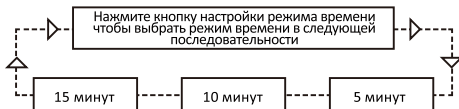


Настройка вибрации

Последовательность режимов вибрации



Настройка режимов массажа

Кнопка настройки режимов массажа

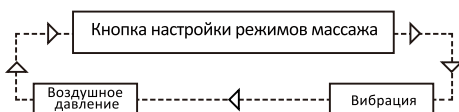

Устранение неполадок

Следуйте указанным далее процедурам, чтобы диагностировать неполадки. Если проблемы не могут быть решены или устройство все еще не функционирует, пожалуйста, отключите питание и свяжитесь с нашим сервис-центром.

Не пытайтесь разобрать или починить устройство самостоятельно!

Признаки	Возможные причины	Решения
Невозможно включить устройство	1. Проверьте состояние кабеля	Проверьте соединение кабеля
	2. Проверьте уровень заряда батареек	Если уровень низкий, то замените батарейки
	3. Проверьте правильность установки батареек	1. Убедитесь, что полярности соблюдены правильно 2. Убедитесь, что батарейки установлены и зафиксированы в чехле
	4. Проверьте правильность подсоединения Блока Питания	Убедитесь в правильности подсоединения Блока Питания
Индикаторы стали темнее	Проверьте уровень заряда батареек	Если уровень низкий, то замените батарейки
Слабое воздушное давление и низкий уровень вибрации	Проверьте уровень заряда батареек	1. Если уровень низкий, то замените батарейки 2. Убедитесь, что батарейки установлены и зафиксированы в чехле

Спецификация

Электроснабжение:

DC: 6 V;

Размеры:

Массажер: 230 x 220 x 234 мм;
Пульт управления: 158 x 132 x 43 мм;
Вес: 625 г

Оптимальные условия:

Температура: 5°C – 40°C
Влажность: ≤ 80 %.

Спецификация:

Атмосферное давление: 860 гПа
Напряженность магнитного поля: 50мТ-250мТ
Мощность: 5,6 ВА

Проверка энергоснабжения:

- Проверьте энергоснабжение. Не включайте устройство, если уровень напряжения превышает указанный.
- Постоянно проверяйте глазную повязку и кабель. При появлении каких-либо повреждений или переломов, немедленно прекратите использование массажера и пришлите его в наш отдел пост-гарантийного обслуживания.

Эксплуатация

- Выключите массажер перед чисткой пульта управления.
- Храните устройство в безопасном месте и не кладите на него тяжелые объекты.
- Примите меры для защиты от влаги, мышей и загрязнения.
- Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно при возникновении каких-либо неполадок. Пожалуйста, свяжитесь с нашими техническими специалистами.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание:

- Если Вы обнаружили какие-либо неполадки в работе устройства в течение гарантийного срока, Вы можете вернуть товар или поменять его на новый при условии предоставления чека и гарантийного талона. На устройстве не должно быть повреждений, и аксессуары должны быть в хорошем состоянии. Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать больше информации.
- На батарейки гарантия не распространяется.
- Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 1. Повреждение вследствие неправильной эксплуатации;
 2. Попытки самостоятельного ремонта устройства;
 3. Отсутствие гарантийного талона;
 4. Причинение ущерба вследствие форс-мажорных обстоятельств.

Гарантия

Продукт является устройством для массажа головы. Срок службы составляет 5 лет. Вам предоставляется гарантия на обслуживание сроком на 1 год с момента покупки на всей территории страны. Для получения обслуживания необходимо предоставить гарантийный талон .

Контакты:

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь по телефону:
+7 (812) 363-43-33 и по e-mail: office@korda.spb.ru

ТАКАШИМА

Магазин "Стимул"

Телефон: +7 (903)754-64-78
Бесплатно по РФ: 8 (800) 500-23-60

E-mail: shop@gitt.ru



www.stimul.gitt.ru

