

ОТО

Back Snuggle

BS-56

Руководство пользователя

Благодарим Вас за выбор продукции ОТО, которая принесет Вам только положительные эмоции от использования. Вся продукция ОТО уже прошла проверку и отвечает требованиям безопасности и качества для его использования в домашних условиях.

Пожалуйста перед использованием массажера внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы знать, как правильно его эксплуатировать.

Авторское право

Все права защищены. Никакая часть из содержания этого документа, или его полное содержание, не может быть воспроизведено, передано, переведено, и сохранено на любом языке или компьютере, на любой форме или каким-либо другим способом без предварительного письменного разрешения компании OTO HOLDING LTD.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	1
Состав массажера.....	2
Пульт управления.....	3
Порядок использования.....	4
Устранение проблем.....	5
Порядок чистки и хранения.....	6
Спецификация.....	7
Новинки ОТО.....	8

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Следующие лица должны проконсультироваться с врачом перед применением массажера:
 - Если у вас установлен кардиостимулятор или другой медицинский искусственный имплант
 - Если у вас проблемы с сердцем
 - Если у Вас проблемы с позвоночником и другие заболевания спины
 - Если у Вас слабые или переломанные кости, особенно в области спины
 - После операции
 - Во время беременности или сразу после родов
 - Если у Вас злокачественная опухоль
 - При остеопорозе
 - При проблемах с циркуляцией крови и тромбозе
 - При кожных инфекциях
 - При прохождении медицинского лечения
 - Если у Вас ненормальное физическое развитие
 - Если у Вас в прошлом были заболевания или травмы спины
2. Не допускайте попадания воды внутрь массажера или разбрзывание вблизи него жидкости.
3. Вода в контакте с электричеством опасна. Не используйте массажер в условиях повышенной влажности (например, в ванной комнате, в душевой или возле бассейна).
4. Подключайте массажер только к рекомендованному источнику питания.
5. Не используйте массажер если сетевая вилка, шнур или сам массажер повреждены.
6. Для предотвращения поражения электрическим током, не разбирайте корпус массажера.
7. Массажер не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющими опыта и знаний, если они не будут обучены и проинструктированы о правилах использования массажера лицами, ответственными за их безопасность.
8. Всегда обращайтесь в представительство ОТО Bodycare или к его уполномоченным дилерам за консультациями и ремонтом. Не пытайтесь отремонтировать массажер самостоятельно, в противном случае Ваша гарантия будет потеряна и станет недействительной.
9. Детям запрещено использовать массажер без присмотра взрослых.
10. Если из массажера послышался необычный звук или шум, прекратите массаж и немедленно отключите массажер от питания. Пожалуйста, немедленно обратитесь в авторизованный Сервисный центр ОТО для консультации и ремонта.
11. Не используйте массажер, если повреждено его покрытие или если есть другие механические или электрические неисправности. Обратитесь за консультацией в уполномоченный Сервисный центр ОТО.
12. Используйте массажер только в соответствии с данным руководством пользователя.
13. Не используйте этот массажер в условиях высокой температуры или рядом с горячими предметами, например возле нагревателей или печей.
14. Не наносите медицинские или косметические крема или лосьоны на спину до и во время использования массажера.
15. Не повреждайте, не растягивайте, не сгибайте и не тяните шнур питания. Не допускайте попадания шнура питания под тяжелые предметы или его защемления между объектами. Поврежденный кабель может привести к пожару или поражению электрическим током.
16. Людям, чувствительным к тепловому воздействию, противопоказано использование функции подогрева.
17. Рекомендованное время использования массажера за один сеанс не должно превышать 15 минут.

СОСТАВ МАССАЖЕРА

1. Массажер плеч
2. Воздушные подушки для талии
3. Массажные ролики для спины
4. Сиденье
5. Карман для пульта управления
6. Пульт управления



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ:

Нажмите кнопку один раз. Она загорится, что означает, что массажер находится в режиме ожидания. Для выключения массажера, нажмите кнопку еще раз.

2. Кнопки Автоматические программы:

Кнопка Vitality - Тонизирование

Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать воздушно-компрессионный массаж в области шеи, плеч и талии, а также Шиацу массаж всей спины. По умолчанию установлена низкая интенсивность массажа. Нажмите кнопку для изменения интенсивности на среднюю и еще раз на высокую. Четвертое нажатие кнопки выключает программу. (Дополнительно может быть активирована функция "Warm" (Прогрев), который останавливается вместе с окончанием автоматической программы).

Кнопка Relief - Облегчение

Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать воздушно-компрессионный массаж в области шеи, плеч и талии. По умолчанию установлена низкая интенсивность массажа. Нажмите кнопку для изменения интенсивности на среднюю и еще раз на высокую. Четвертое нажатие кнопки выключает программу.

Массаж определенных частей спины:

3. Кнопка выбора массажа шеи и плеч

Нажмите кнопку для активации компрессионного массажа шеи и плеч. По умолчанию установлена низкая интенсивность. Нажмите кнопку чтобы установить среднюю, а затем высокую интенсивность. Четвертое нажатие кнопки останавливает массаж.

4. Кнопка выбора массажа талии

Нажмите кнопку для активации компрессионного массажа талии. По умолчанию установлена низкая интенсивность. Нажмите кнопку чтобы установить среднюю, а затем высокую интенсивность. Четвертое нажатие кнопки останавливает массаж.

5. Кнопка выбора Шиацу массажа спины

Нажмите кнопку для активации Шиацу массажа спины. Нажмите кнопку еще раз для выключения массажа. (Дополнительно может быть активирована функция "Warm" (Прогрев), который останавливается вместе с окончанием автоматической программы).


6. Кнопка выбора функции прогрева "Warm"

Нажмите кнопку один раз, чтобы активировать функцию прогрева при выполнении Шиацу массажа спины или программы "Тонизирование". Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить прогрев. (Эта функция прекращается вместе с окончанием массажа).

7. Регулировка высоты размещения массажера плеч

Кнопка Вверх: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы поднять массажер плеч до нужного Вам положения. Отпустите кнопку, чтобы остановить передвижение.

Кнопка Вниз: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы опустить массажер плеч до нужного Вам положения. Отпустите кнопку, чтобы остановить передвижение.

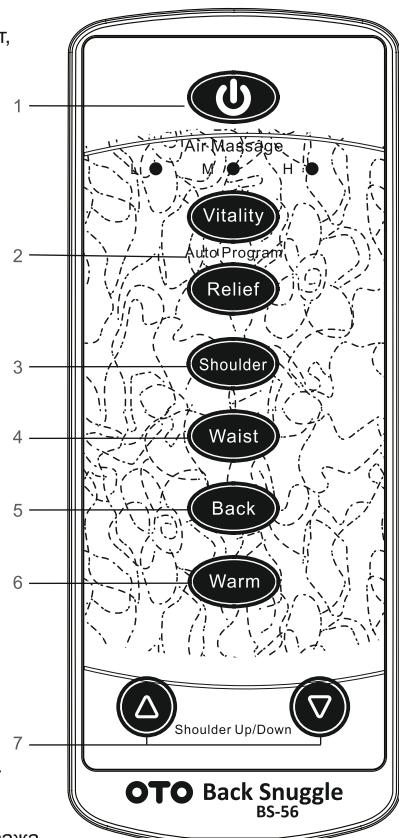

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Разместите массажер на стуле или диване с задней спинкой.
2. Вставьте вилку в розетку электросети.
3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, а затем выберите нужный режим массажа.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

На этой странице приведены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть с массажером. Если вы не можете решить проблему руководствуясь приведенной ниже информацией, свяжитесь с компанией ОТО или его официальным дилером.

Если возникшая проблема не встречается в приведенном ниже списке, попробуйте провести следующие действия:

1. Выключите массажер и отключите его от сети.
2. Подождите 60 минут.
3. Подключите массажер к сети и включите его.
4. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Массажер не подключен к питанию правильно.	Плотно вставьте вилку в розетку. Проверьте соответствие напряжения питания массажера напряжению питания местной электросети.
	Массажер только что закончил 15 минутный сеанс массажа и автоматически переключился в режим ожидания.	Если Вы хотите продолжить массаж, повторно нажмите кнопку Power (ВКЛ/ВЫКЛ).
	Возможно Вы использовали массажер без перерыва в течении 40 минут из-за чего сработала защита от перегрева.	Отключите массажер от сети и дайте ему остывть в течении 60 минут, после чего Вы можете включить его снова.
	На массажер была оказана чрезмерная нагрузка.	Уберите нагрузку с массажера и снова начните массаж.
Массаже сильно нагрелся	Массажер непрерывно работал без перерыва более 40 минут.	Отключите массажер от сети и дайте ему остывть в течении 60 минут, после чего Вы можете включить его снова.
Во время работы массажера издается шум	Этот звук вызван работой мотора массажера.	Прослушивание звука механизмов вполне нормально и не означает, что массажер неисправен.

ПОРЯДОК ЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ

Очистка

Не используйте металлические мочалки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости (например, бензин или ацетон) для очистки массажера.

1. Отключите кабель питания от электрической розетки перед очисткой.
2. Для очистки массажера, протирайте его сухой тканью.
3. Не используйте влажную ткань или моющие средства при чистке.

Хранение

1. Отключите вилку питания от розетки.
2. Храните массажер в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.
3. Не кладите тяжелые предметы на массажер.
4. Во избежание повреждения ткани основного массажного блока, не допускайте контакта между поясным или специальным ремнем и тканью блока во время эксплуатации или хранения массажера.

Не используйте массажер, если повреждено его покрытие или если есть другие механические или электрические неисправности. Обратиться за консультацией в уполномоченный Сервисный центр ОТО.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	ОТО Back Snuggle
Модель	BS-56
Тип продукта	Массажер Для Спины
Мощность	48 Вт
Напряжение питания	AC 100-240В / 50-60Гц
Таймер	15 минут
Габаритные размеры	80(Д) x 23(Ш) x 45(В) см
Габариты упаковки	84(Д) x 22(Ш) x 49(В) см
Вес нетто / брутто	8,3 кг / 11 кг
Сертификат РОСТЕСТ	РОСС SG.АГ93

НОВИНКИ ОТО

Уже более чем 30 лет компания ОТО создает инновационные продукты для здоровья и постоянно совершенствует свои знания в этой области. Итогом многолетней работы является продукция компании, в которой сбалансированы традиционные знания Востока и революционные технологии Запада.

Основным направлением деятельности компании ОТО является производство товаров, помогающих людям жить лучше и дольше. Товары ОТО для фитнеса и отдыха поддерживают тело в тонусе и помогают его омоложению. Развивая свой бизнес, ОТО стремится стать народной маркой, выпуская общедоступные товары.

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ ОТО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Массажные Кресла



OTO CYBER Indulge U



OTO Adelle One



OTO Dante One

Массажеры Ног



OTO Big Foot



OTO Adore Foot



OTO e-Physio

Фитнес Тренажеры



OTO Spring Ab



OTO Swing



OTO Flabelos

OTO

www.otobodycare.ru